



UTILISATION DES TESTS RAPIDES

Les tests rapides sont faciles à utiliser et fournissent un résultat après quelques minutes.

Si vous avez des symptômes de la COVID-19 comme la fièvre, la toux, le mal de gorge ou la perte soudaine de l'odorat et du goût, isolez-vous immédiatement et faites un test rapide. Si vous décidez de ne pas faire de test de dépistage pour la COVID-19 ou si vous n'y avez pas accès, vous devez vous isoler à votre domicile.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Tout le matériel nécessaire pour faire votre test est inclus dans la trousse, à l'exception d'un minuteur ou d'un chronomètre. Vous pourriez également avoir besoin d'un verre si votre trousse ne comporte pas de support à tube. Garder les tests rapides hors de la portée des enfants et des animaux.

COMMENT FAIRE UN TEST RAPIDE


ÉTAPE 1

Désinfecter la surface et se laver les mains.



ÉTAPE 2

Mettre le liquide dans le tube (si nécessaire).

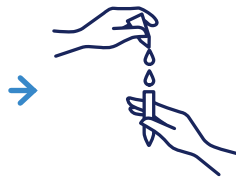

ÉTAPE 3

Insérer la tige dans une narine en tournant contre les parois du nez. Répéter dans l'autre narine en utilisant la même tige.




ⓘ Afin d'augmenter les chances de détecter le virus, frotter l'intérieur de chaque joue pendant au moins 5 secondes avant de procéder au prélèvement dans les 2 narines.




ÉTAPE 4

Déposer la tige dans le tube et la tourner dans le liquide.

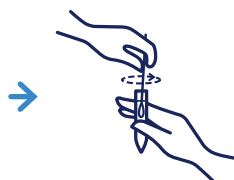


ÉTAPE 5

Déposer le tube avec la tige sur le support (ou dans un verre) et laisser reposer pendant 2 minutes.

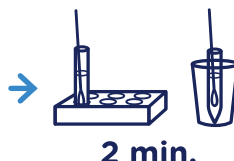

ÉTAPE 6

Retirer la tige en appuyant sur les parois du tube afin d'en retirer le plus de liquide possible.

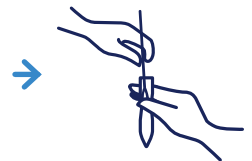

ÉTAPE 7

Mettre le bouchon sur le tube et déposer des gouttes dans le puits de la cartouche.



ÉTAPE 8

Attendre au moins 15 minutes. Ne pas toucher à la cartouche pendant la période d'attente.



ÉTAPE 9


Lire le résultat sur la cartouche.

• **Positif** : Le résultat est positif lorsque la ligne C et la ligne T apparaissent dans la fenêtre. L'ordre d'apparition des lignes n'a pas d'importance et même si une ligne est pâle, le résultat indiqué est le bon.

• **Négatif** : Le résultat est négatif lorsque seule la ligne C apparaît dans la fenêtre.

• **Invalide** : Le résultat est invalide si la ligne C n'est pas visible dans la fenêtre.

La lecture des résultats du test avant ou après 15 minutes peut donner des résultats incorrects.

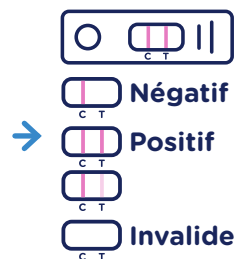

TYPES DE TESTS DISPONIBLES

	BTNX	BD VERITOR	SD BIOSENSOR	FASTEP	PANBIO
Description	Boîte de 5 tests	Boîte de 30 tests	Boîte de 25 tests	Boîte de 20 tests	Boîte de 25 tests
Nombre de gouttes de liquide	1 fiole préremplie	Tube déjà rempli	Tube déjà rempli	Tube déjà rempli	Environ 12 gouttes
Nombre de tours dans chaque narine	5 tours (15 secondes)	5 tours (15 secondes)	4 tours (15 secondes)	5 tours (15 secondes)	5 tours (15 secondes)
Nombre de tours dans le liquide	10 à 15 tours	10 à 15 tours	10 tours	10 à 15 tours	5 tours
Nombre de gouttes à déposer dans la cartouche	3 gouttes	3 gouttes	4 gouttes	3 gouttes	5 gouttes

QUOI FAIRE SELON LE RÉSULTAT OBTENU

- Si le résultat est positif, il faut s'isoler en respectant les consignes à suivre pour la personne atteinte de la COVID-19.
- Si le résultat est négatif, il faut s'isoler et faire un deuxième test rapide 24 à 36 heures plus tard.
- Si le résultat est invalide, il faut refaire un test rapide avec du nouveau matériel.

Pour toutes les consignes d'isolement, consultez [Québec.ca/isolement](https://quebec.ca/isolement).

DÉCLARER SON RÉSULTAT DE TEST

Si vous avez fait un test rapide, il est important d'en déclarer le résultat. Remplissez le formulaire de déclaration pour chaque test rapide effectué, que le résultat soit positif ou négatif. Pour ce faire, rendez-vous au [Québec.ca/testCOVID-19](https://quebec.ca/testCOVID-19).



[Québec.ca/testCOVID-19](https://quebec.ca/testCOVID-19)

Contactez le centre antipoison local en cas d'ingestion accidentelle ou d'exposition directe de la peau aux solutions contenues dans les trousse de dépistage rapide.